

INNOWALK

Inn og ut

Quick Guide



Sjekkliste før bruk

- ✓ Etterstram og fest eventuelt løse skruer og deler
- ✓ Kontroller oppreisningsfunksjonen og at ikke føringsnoren er skadet

- ✓ Kontakt Made for Movement eller din hjelpemiddelkonsulent fra Made for Movement om det er ulyder eller deler som er i stykker

Forflytning av brukeren inn i Innowalk

1



Innowalk skal være i sittende posisjon. Åpne alle belter og reimer og forflytt brukeren inn manuelt eller ved hjelp av personløfter.

2



Plasser brukeren godt tilbake på setet.

3



Fest bryststøtten.

4



Fest leggbøylene og føringsnoren.

NB



For Innowalk Large: Fest antioverstrekk reim på leggbøylene.

5



Plasser hælen helt tilbake på fotplaten.



Stram og fest reimene over føttene.

6 **MERK!** Kontroller at føringsnoren har rett stramhet før brukeren forflyttes til stående.

Innowalk Ekstra Small



Still føttene parallelt og løsne /øke stramheten på føringsnoren ved hjelp av frikoblingen.

Innowalk Small



Trykk inn rød knapp og trekk ut låsen. Juster med håndtaket til angitt posisjon. Føringsnoren strammes ved å presse håndtaket nedover.


Innowalk Medium/Large



Sveiv på håndtaket til angitt posisjon ved stopp-skruen. Føringsnoren strammes ved dreining mot høyre.

MERK! Det er viktig at håndtaket står i samme posisjon hver gang produktet er i bruk.

7

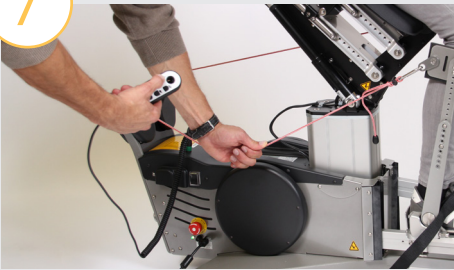

Hold igjen på føringsnoren når brukeren forflyttes fra sittende til stående. Kontroller at føringsnoren har riktig stramhet når brukeren er i stående posisjon.

8



Fest hoftebeltet.

✓ Sett igang gangbevegelsen og juster tempo til brukeren.

✓ Kontroller at brukeren står og beveger seg optimalt.

Sett på nødvendig tilbehør

Bord



Fest og sving inn bordet.

Antioverstrekk



Fest rem for antioverstrekk på leggbøylen.

Skuldrestopper



Fest skuldrestopperne.

Håndtak



Håndtak for armbevegelse

Våre dyktige
hjelpemiddelkonsulenter veileder
i optimal forflytningsteknikk,
for både brukeren og hjelper.

MERK!

Håndtering av Innowalk og brukere i dette hjelpemiddelet skal gjøres av personer som har fått opplæring av en hjelpemiddelkonsulent fra Made for Movement.

For mer informasjon, se brukermanualen for Innowalk eller kontakt din hjelpemiddel-konsulent fra Made for Movement.


Forflytning av brukeren ut av Innowalk

1



Bordet svinges ut, fjern skuldrestropper, remmen for anti-overstrekk og **løsne hoftebeltet**.

2

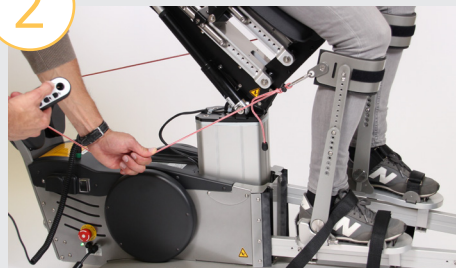

Hold igjen på førings-snoen når brukeren forflyttes fra stående til sittende.

3



Løsne reimene over føttene.

4



Løsne føringssnoen og leggboøylen.

5



Løsne bryststøtten og forflytt brukeren ut manuelt eller ved hjelp av personløfter.



Kontakt oss gjerne for mer informasjon

 + 47 35 50 51 20

 info@madeformovement.com

 www.madeformovement.com

 **made for
movement**